

Quattro™ FX

FULL FACE MASKE

Weniger Maske. Mehr Freiheit.

Dank ihres leichten, unaufdringlichen Designs ist die Quattro FX eine gute Alternative zu konventionellen Full Face Masken.

Vorteile für professionelle Anwender ...

Größe bestimmen, nach unten schwenken, perfekter Sitz – so einfach ist das

Quattro FX gibt Ihnen die Mittel, schnell, einfach und zuverlässig einen komfortablen und dichten Maskensitz zu erzielen – beim ersten Mal und jedes Mal danach. Die speziell entwickelte Schablone zur Ermittlung der Größe und die **Schwenk**-Technik vereinfachen die Größenauswahl, das Anlegen und die Abdichtung. Sie sparen Zeit, damit Geld und haben zufriedene Patienten.

Zeit- und Kosteneinsparungen

Durch die dämpferartige Kombination aus Spring Air™-Maskenkissen und Flexi-Rahmen konnte auf den Einsatz einer Stirnstütze verzichtet werden. Hierdurch lässt sich Quattro FX noch schneller und sicherer anlegen.

Therapieakzeptanz

Komfort, Leistungsumfang und Freiheitsgefühl von Quattro FX sorgen dafür, dass Benutzer die Therapie von Beginn an besser annehmen und fortsetzen.

... und für Patienten

Qualität und Leistung auf höchstem Niveau

Die neue Kombination aus Spring Air-Maskenkissen und Flexi-Rahmen bietet hohe Stabilität auch ohne konventionelle Stirnstütze. Quattro FX verbindet damit Leistung und Komfort in einer unaufdringlichen Full Face Maske.

Freiheit, die Sie schätzen werden

Die Reduktion von Kontaktpunkten mit dem Gesicht lässt ein neues Tragegefühl entstehen. Freie Sicht reduziert körperliche und emotionale Barrieren, die mit konventionellen Full Face Masken auftreten können.

Für einen guten Schlaf

Das hochmoderne Spring Air-Maskenkissen verteilt den Maskendruck gleichmäßig und verhindert unerwünschte, äußere Einflüsse. Quattro FX sitzt so sicher und komfortabel, dass Sie gut schlafen werden.



Quattro™ FX
FULL FACE MASKE



Technische Highlights

Größe bestimmen. Schwenken. Perfekter Sitz. **NEU**

Das Anpassen, Anlegen und Abdichten von Quattro FX geht schnell und einfach. Die speziell angefertigte **Schablone zur Größenauswahl** sorgt für eine leichte und genaue Anpassung.

Nachdem die richtige Größe ermittelt wurde, kann die Maske dank der **Schwenk**-Technik ganz leicht angelegt werden:

- 1 Positionieren Sie das Maskenkissen zunächst von schräg oben auf dem Nasenrücken, ...
- 2 ... **schwenken** Sie die untere Maskenhälfte dann nach unten auf das Gesicht, um sie **abdichten**.

Quattro FX: Passt richtig, sitzt sicher. Beim ersten Mal und jedes Mal.

Uneingeschränkte Sicht

und ein Gefühl der Freiheit, da die Quattro FX Maske in der Mitte des Nasenrückens aufliegt. Der kompakte Rahmen macht das Schlafen auf der Seite angenehmer.

Integrierte Ausatemöffnung

lässt die Luft sanft und leise aus der Maske austreten.

Flexibler, strapazierfähiger Flexi-Rahmen

stark genug, um die Maske auf dem Gesicht zu stabilisieren, und gleichzeitig weich genug, um Bewegungsfreiheit während des Schlafes zu gewährleisten.

Um 360° drehbares Kniegelenk


ermöglicht eine anwenderfreundliche Positionierung des Atemschlauches.

Drehadapter

ermöglicht das praktische Anschließen und Abnehmen des Atemschlauches

Neues Komfort-Kopfband

mit konturiertem Design, das sicheren Sitz gewährleistet und sensible Kopfbereiche ausspart.

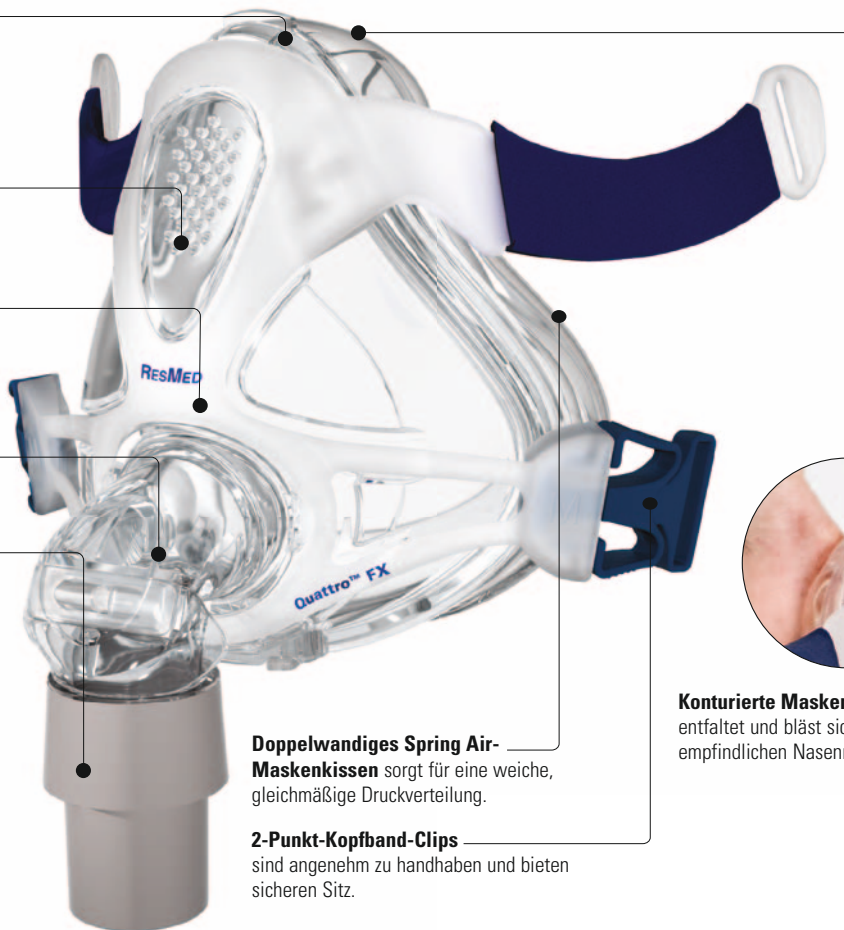


Doppelwandiges Spring Air-Maskenkissen sorgt für eine weiche, gleichmäßige Druckverteilung.

2-Punkt-Kopfband-Clips sind angenehm zu handhaben und bieten sicheren Sitz.

Konturierte Maskenkissenmembran entfaltet und bläst sich vorsichtig um den empfindlichen Nasenrückenbereich auf.

Überreicht durch:

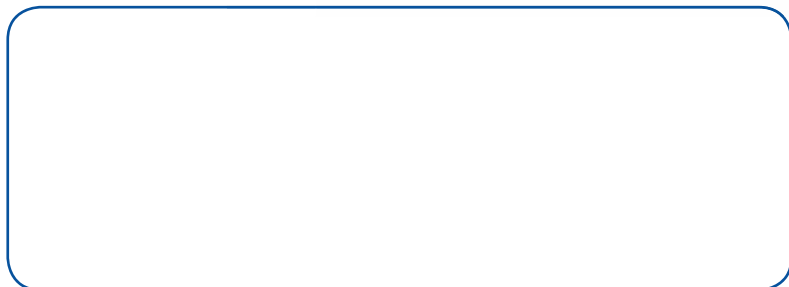

Artikelnummern

Small	61703
Medium	61704
Large	61705

Hilfsmittelnr. 14.24.16.6028

Quattro™ FX
FULL FACE MASKE

www.quattrofx.com